



GLOBAL MEDICAL

EQUIPAMIENTO - DISPOSITIVOS - INSUMOS MEDICOS

CARACTERISTICAS


Mascarillas de 4 capas que protegen contra bacterias, virus y partículas. Por su diseño permite que sea altamente transpirable y resistente a los fluidos.

Su forma convexa, el diseño de sus bandas elásticas y el clip de aluminio para el ajuste a la nariz; aseguran un excelente sello, adaptándose a un amplio rango de tamaños de cara brindando una efectiva y confortable protección respiratoria contra partículas sólidas y líquidas sin aceite.

Esta fabricado de tela y filtro no tejido de alta calidad que brinda un ajuste suave y cómodo.

Capas protectoras:

- Capa doble Interna que entra en contacto con el rostro, de tela no tejida que es cómoda y no irrita.
- Capa media (filtro) de esponja que atrapa las partículas infecciosas.
- Capas doble que actúa como barrera inicial.

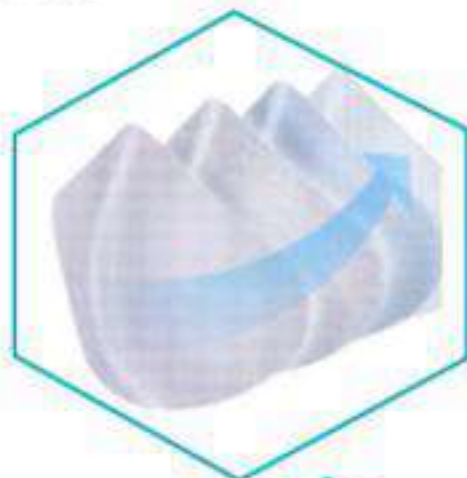

MASCARILLA KN95

Faciales



Mascarilla	KN95
Materiales	4 capas SBPP (Polipropileno - Spunbond)+ MBPP (Polipropileno - Meltblown) + filtro de esponja o algodón + SBPP (Polietileno / PET - bicomponente y Poliéster)
Colores	Blanco y otros
Ajustes	Elástico a las orejas y ajuste de nariz cubierto que se encuentra en el borde superior de la mascarilla, para prevenir un posible efecto de escape.
Certificados	ISO, CE BFE (Bacterial Filtration Efficiency mayor 99%) Se usa para determinar la eficiencia de la filtración bacteriana de diversos materiales de filtración, 3 micras. PFE (Particular Filtration Efficiency mayor 99%) Mide la eficiencia de la Filtración de partículas pequeñas (generalmente de 0,1 micras) de una mascarilla. Aislamiento efectivo de bacterias, virus, polvo, polen, olores etc
Presentación	Cajas de 10 Unidades.
Indicaciones	Protección personal, uso médico e industrial.
Instrucciones de uso	<ol style="list-style-type: none">1. Colocar sobre el rostro2. Acomodar los elásticos en ambos pabellones auriculares.3. Por último ajustar el arco nasal. <p>Retiro de la mascarilla:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Reemplace las mascarillas a tiempo2. No toque el exterior de la máscara usada3. Deseche la máscara en el basurero cubierto. <p>NO REUTILIZAR</p>
Almacenaje:	lugar seco

Fabricante: Shandong Xingguang Protective Products Co, Ltd.

Origen: China

