



GLOBAL MEDICAL

EQUIPAMIENTO - DISPOSITIVOS - INSUMOS MEDICOS



CARACTERISTICAS

Mascarillas de 3 capas que protegen contra bacterias, virus y partículas.

Esta fabricado de tela y filtro no tejido de alta calidad que brinda un ajuste suave y cómodo .

Capas protectoras:

- *Capa Interna que entra en contacto con el rostro, es cómoda y no irrita.*
- *Capa media (filtro) que atrapa las partículas infecciosas en forma bidireccional, filtra tanto el aire inhalado como el aire exhalado.*
- *Capa externa que actúa como barrera inicial.*

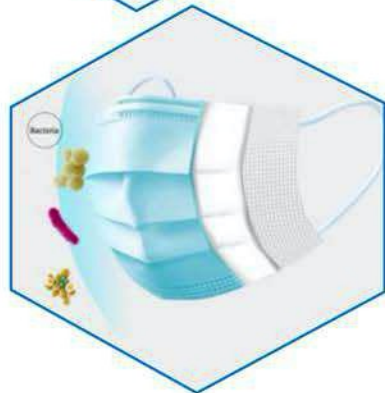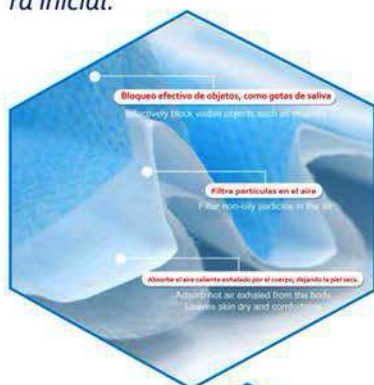

Fabricación: China



MASCARILLAS MEDICAS

Faciales Desechables



Mascarilla	3 pliegues
Materiales	3 capas SBPP (Polipropileno – Spunbond)+ MBPP (Polipropileno – Meltblown) + SBPP (Polietileno / PET – bicomponente y Poliéster)
Colores	Celeste y otros
Tamaño	17,5 x 9,5 cm
Ajustes	Elástico a las orejas y ajuste de nariz cubierto que se encuentra en el borde superior de la mascarilla, para prevenir un posible efecto de escape.
Certificados	ISO, CE BFE (Bacterial Filtration Efficiency mayor 99%) Se usa para determinar la eficiencia de la filtración bacteriana de diversos materiales de filtración, 3 micras. PFE (Particular Filtration Efficiency mayor 99%) Mide la eficiencia de la Filtración de partículas pequeñas (generalmente de 0,1 micras) de una mascarilla. Aislamiento efectivo de bacterias, virus, polvo, polen etc. Presión diferencial 29,4 pa/m. Cumple con ASTM F2100 Nivel 1/2/3.
Presentación	Cajas de 50 unidades/40 cajas por master.
Instrucciones de uso	1. Colocar sobre el rostro y acomodar bajo la barbilla. 2. Acomodar los elásticos en ambos pabellones auriculares. 3. Por último ajustar el arco nasal.
Almacenaje:	lugar seco